

シンプルでコンパクトなスタンダードモデル

ファースト イオン麻酔器 04型


FIA-04



- 単3形乾電池2本で使用可能
- 外耳電極にプラチナ(白金)を採用
- 断線・接続不良時には警告音で異常をお知らせ

特徴

- ケーブルコネクタ部はタッチプルーフ型を採用し、操作者・患者の安全性を向上
- 患者回路が断線・接続不良時に警報音が鳴る機器の自己判断機能付き
- 電池が消耗してくると警告表示が出ます。表示が出て1回は使用できます
- 局部麻酔剤(4%キシロカイン2mL・1000倍アドレナリン1mL)に通電し、皮膚または粘膜組織に浸透させ麻酔を施す一種の局部麻酔装置で、キシロカインスプレーや麻酔薬塗布に比べて格段の麻酔効果が期待出来ます

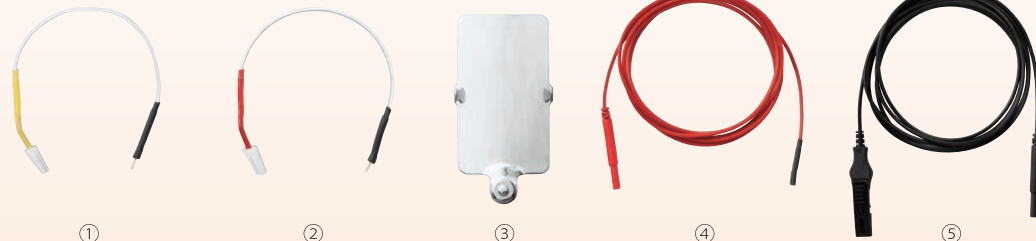

付属品

- ① 外耳電極 小 (黄) (21-501-00)
- ② 外耳電極 大 (赤) (21-502-00)
- ③ 対極板 (21-511-00)
- ④ 外耳電極ケーブル(赤) (21-521-00)
- ⑤ 対極板ケーブル(黒) (21-522-00)
- ⑥ ゴムバンド (21-530-00)

仕様

定格電圧	直流 3V
電池	単 3 形アルカリ/マンガン乾電池 2本
消費電流	0.1A
定格出力	直流10V 0.5mA(20kΩ負荷)
設定電流	0.1-0.5mA(0.1mAステップ)
タイマー設定時間	1-20分(1分ステップ)
報知用ブザー音	・通電終了後の報知(約10秒間の連続音) ・患者回路断線及び外耳道内の麻酔薬液不足警報音(断続音)
正常動作抵抗値	5-20kΩ

寸法	W90mm×D135mm×H35mm
重量	230g(電池含まず)
安全規格	JIS T 0601-1:1999 に適合
EMC	JIS T 0601-1-2:2012 に適合
電撃に対する保護の形式	内部電源機器
電撃に対する保護の程度	BF形装着部を有する機器
による装着部の分類	

- 販 売 名 ファーストイオン麻酔器 04 型
- クラス分類 管理医療機器
- 承認・認証・届出 226AFBZX00014000
- JMDNコード 70575000

構成

本体	1台
単 3 形乾電池	2本
外耳電極 小 (黄) (21-501-00)	1個
外耳電極 大 (赤) (21-502-00)	1個
対極板 (21-511-00)	1個

外耳電極ケーブル(赤) (21-521-00)	1本
対極板ケーブル(黒) (21-522-00)	1本
ゴムバンド(21-530-00)	1個

